



PREMIUM QUALITY



MADE IN GERMANY

KOMFORT UND FUNKTIONALITÄT

SYSTEM LABORMÖBEL



SYSTEM LABORMÖBEL



Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten

SYSTEM-LABORMÖBEL

Laborplanung	4-5
Systemdetails	6-7



UNTERBAU

Grundmodul	8-9
Türen und Schübe	10-13
Arbeitsfläche	14-17



OBERBAU

Regale, Medienanschlüsse	18-19
Oberschränke	20-21



LABORMÖBEL

Sicherheitsschränke	22-23
Regale und Schränke	24-25
Labortische	26-27



Die Konzeption unserer Systemmöbel ruht auf vier Eckpfeilern:

QUALITÄT

Maßstab für unsere Möbel sind die anspruchsvollen Bedürfnisse aus Industrie und Labor. Die Verbindung von hochwertigen Materialien und durchdachter Konstruktion garantiert Stabilität und Beständigkeit.

FLEXIBILITÄT

Das System eröffnet durch die zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten eine individuelle und optimale Anpassung an Ihre individuellen Räumlichkeiten.

FUNKTIONALITÄT

Lagerungslösungen und verdeckte Kabelführungen sorgen für ein geordnetes und störungsfreies Arbeitsumfeld.

DESIGN

Klare Strukturen und hochwertige Materialien prägen einen faszinierend zeitlosen und einheitlichen Stil.



KOMFORT UND FUNKTIONALITÄT

Das Labormöbel-System vereint bewährte QATM-Qualität mit einem durchdachten und flexiblen Modulsystem. Ausgehend vom Grundmodul aus Aluminium, kann jedes Schrankelement mit Schubladen, Türen, Einbauten und Oberbau individuell ausgestattet werden.

Besondere Sorgfalt steckt im Detail:


Die Möbelemente sind verschraub- und vor Ort montierbar. Jeder Zentimeter wurde für optimale Lager- und Arbeitsflächennutzung konzipiert. Das Möbelsystem kann sowohl freistehend als auch in vielseitigen Kombinationen eingesetzt werden. Die Schrankmodule können mit Hubwagen bewegt und am Aufstellort mit einer Sockelblende geschlossen werden.

MEDIENANBINDUNG

Die Anschlüsse können verdeckt durch die gesamte Schrankkombination geführt werden. In die Säulen der Regal- und Oberschranksaufbauten sind verschiedene Medienanschlüsse integrierbar.

LABORPLANUNG

FOTO 1

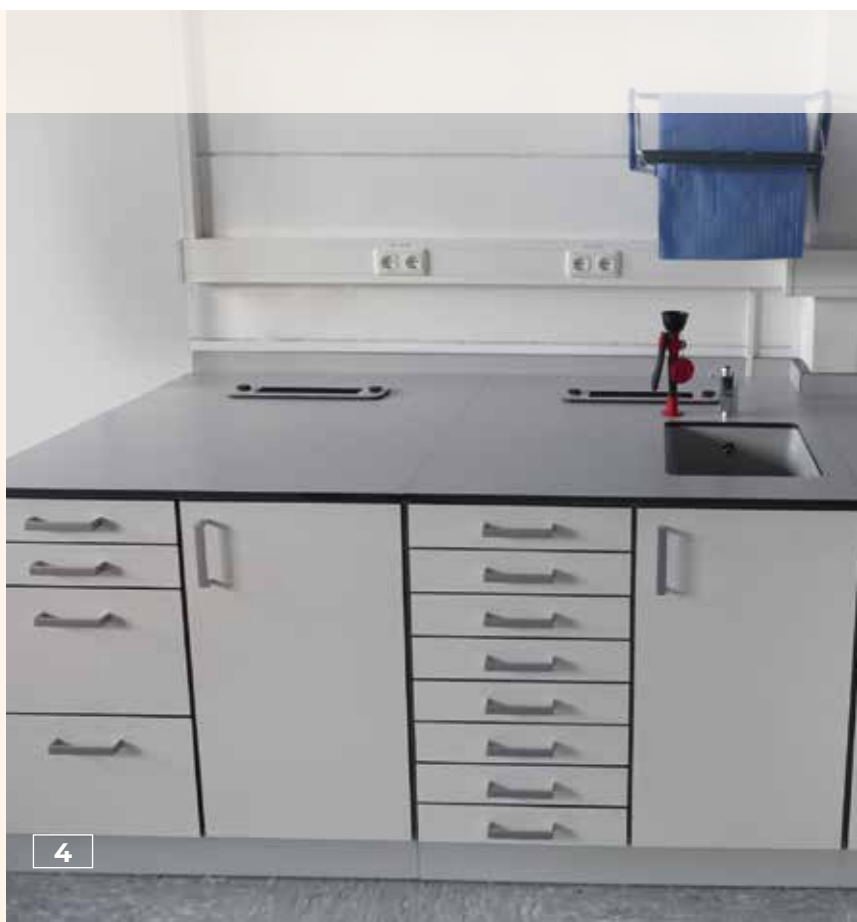



AUFBAU



MEDIENANBINDUNG

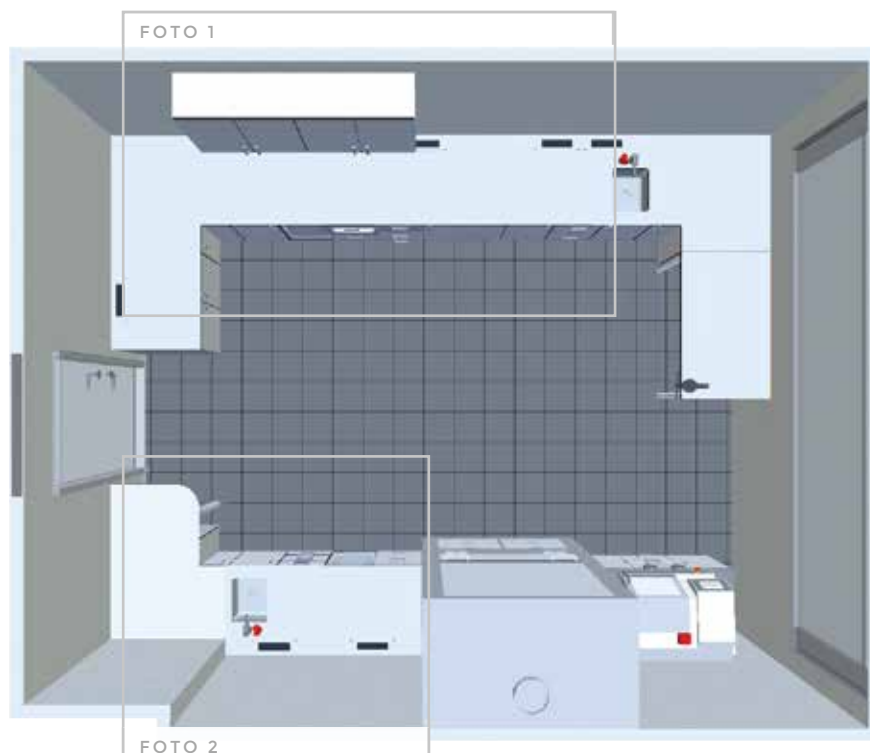


FOTO 1

FOTO 2

QATM



FOTO 2



3D-PLANUNGSSOFTWARE

Besuchen Sie jetzt Ihr Wunschlabor!

Mit unserer computergestützten 3D-Planung können Sie Ihre Räumlichkeiten ganz nach Ihren Vorstellungen ausstatten und bereits im Vorfeld virtuell besuchen.

Wir lassen uns gerne von Ihnen inspirieren und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen Lösungen, die perfekt an Ihre örtlichen Gegebenheiten angepasst sind. Nach anschließender automatischer Erstellung eines Angebots gewinnen Sie in einer Simulationsfahrt einen maßstabsgerechten Eindruck Ihres neuen Arbeitsplatzes.

Unsere Möbel werden komplett im eigenen Haus gefertigt und genügen selbst höchsten Qualitätsansprüchen – „Made in Germany“ von QATM.

KORPUS

Unsere Korpuselemente sind aus pulverbeschichtetem Aluminium in neutralem Weißaluminium (RAL 9006). Sie passen sich an verschiedenste Dekore an und wirken dezent und klar.

Die abnehmbaren Sockelblenden ermöglichen den einfachen Transport mit einem Hubwagen.



TRANSPORTÖFFNUNG



DEKOR

Hell und elegant erscheint die Kombination aus dem in Weißaluminium RAL 9006 pulverbeschichteten Aluminiumkorpus und HPL mit der charakteristischen schwarzen Kante in den Farben Softgrau HPLD1 und Pastellgrau HPLD6 für Türen und Schübe.

ARBEITSOBERFLÄCHEN

Mit unserer farblich auf den stabilen Aluminiumkorpus abgestimmten Auswahl an Arbeitsflächenmaterialien werden die verschiedenen Belastungsansprüche abgedeckt. HPL empfiehlt sich als Standardmaterial für eine starke Beanspruchung und Gewichtsbelastung. Bei hoher Chemikalienbelastung entspricht die Vollkeramik-Oberfläche mit Ablaufwulst schließlich höchsten Belastungsstandards.



VOLLKERAMIK

GRIFFE

Die Metallgussgriffe passen durch die gleiche Pulverbeschichtung mit Weißaluminium RAL 9006 optimal zum Korpus.



GRIFFE

SYSTEM DETAILS





MEDIENEINGANG



SOFT EINZUG



SCHEIBENABLAG

GRUNDMODUL

- ▶ Korpus, pulverbeschichtet RAL 9006
- ▶ Unterbau in zwei Höhen (800/900 mm)
- ▶ Unsichtbare Medienanschlussführung

ZEILEN

- ▶ Grundmodul ein-, zwei oder dreizeilig
- ▶ Türen einzeilig und Schübe ein- bis zweizeilig

SCHÜBE UND TÜREN

- ▶ Maßeinheit 21 HT (800 mm)
- ▶ Maßeinheit 24 HT (900 mm)
- ▶ Standard: HPLD6 Pastellgrau mit schwarzer Kante
- ▶ Lagereinbauten wie Scheibenablage oder Abfallsammler

ARBEITSPLATTE

- ▶ HPLD1 Softgrau, optional: Vollkeramik, Labor-HPL, Edelstahl

EINBAUTEN

- ▶ In Grundmodul integrierte Funktionselemente, wie z.B. Umwälzkühlung, Sicherheitsschrank, Systemkühler
- ▶ Einbauspüle
- ▶ Abfallsammler

REGALE UND OBERSCHRÄNKE

- ▶ Stabile, freistehende Säulenkonstruktion
- ▶ In Säulen integrierte Medienleisten, unsichtbare Anschlussführung
- ▶ Oberschränke mit Türen oder Hochschwenklappe

RATMA



HOCHDRUCKLAMINAT (HPL)

Durch Hochdruckverpressen von mehreren Lagen Papier und Harzen entsteht der duroplastische Kunststoff HPL. Das Material besteht zu ca. 60 % aus dem nachwachsenden Rohstoff Papier, die Deckschichten aus widerstandsfähigem und hitzebeständigem Melamin. Darüber hinaus zeichnet es sich durch eine besondere Abrieb- und Stoßfestigkeit aus.

HPL hat eine höhere Haltbarkeit als konventionelle Produkte und ist wegen der festen und hygienisch dichten Oberfläche sehr pflegeleicht.





2-FACH/800



2-FACH/900



ECKE/800

GRUNDMODUL 2-FACH

Breite	880 mm	
Höhe	800 mm	900 mm
Best.Nr.	A5810001	A5810003

ECKSCHRANK

Breite/Tiefe	1030 mm	
Höhe	800 mm	900 mm
Best.Nr.	A5810007	A5810008

GRUNDMODUL 3-FACH

Breite	1320 mm	
Best.Nr.	A5810002	A5810004



3-FACH/800




3-FACH/900



ECKE/900

SYSTEM GRUNDMODUL

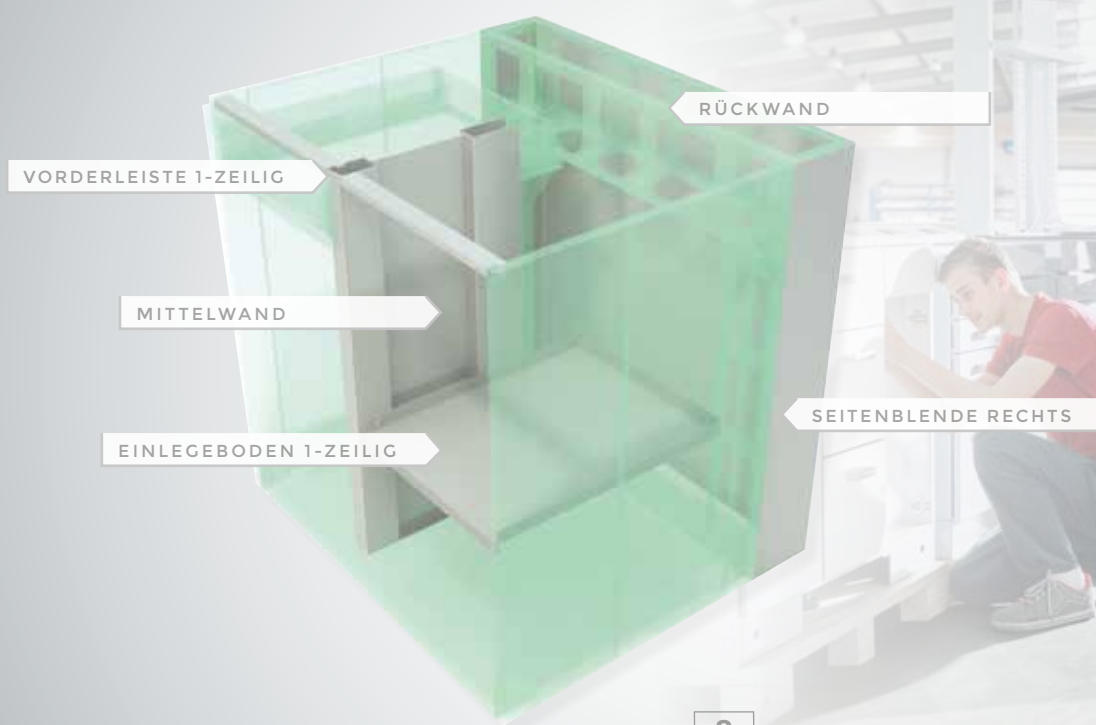



ABSCHLUSS RECHTS/800



ABSCHLUSS RECHTS/900



ABSCHLUSS LINKS/800



ABSCHLUSS LINKS/900

ABSCHLUSSSCHRANK RECHTS

Breite	1240 mm	
Höhe	800 mm	900 mm
Best.Nr.	A5810011	A5810012

ABSCHLUSSSCHRANK LINKS

Breite	1240 mm	
Höhe	800 mm	900 mm
Best.Nr.	A5810009	A5810010

ABSCHLUSSINSEL

Breite	1600 mm	
Höhe	800 mm	900 mm
Best.Nr.	A5810013	A5810014



ABSCHLUSSINSEL/800



ABSCHLUSSINSEL/900

RATA



GRUNDMODULE

Der Korpus ist in ein-, zwei- oder dreizeiliger Ausführung und in zwei verschiedenen Arbeitshöhen erhältlich. In Kombination mit den Eck- und Abschlusslösungen lassen sich optimal an die Räumlichkeiten angepasste Kombinationen erstellen.

BLENDEN

Rückwände und die seitlichen Medienöffnungen können verblendet werden, so dass sie freistehend ein geschlossenes Erscheinungsbild ergeben.

Für die weitere Ausstattung mit Türen und Schubladen werden Mittelwände und Frontblenden passend hinzugefügt.



Abb. Anschlag rechts



TÜREN

Breite	440 mm				
Höhe	15 HT	18 HT	20 HT	21 HT (800 mm)	24 HT (900 mm)
Anschlag rechts					
Best.Nr.	A5810047	A5810048	A5810243	A5810049	A5810050
Anschlag links					
Best.Nr.	A5810043	A5810044	A5810242	A5810045	A5810046

EINLEGEBODEN

Zeilen	1	2
Best.Nr.	A5810082	A5810083



EINLEGEBODEN/1-ZEILIG



EINLEGEBODEN/2-ZEILIG

SYSTEM TÜREN UND SCHÜBE


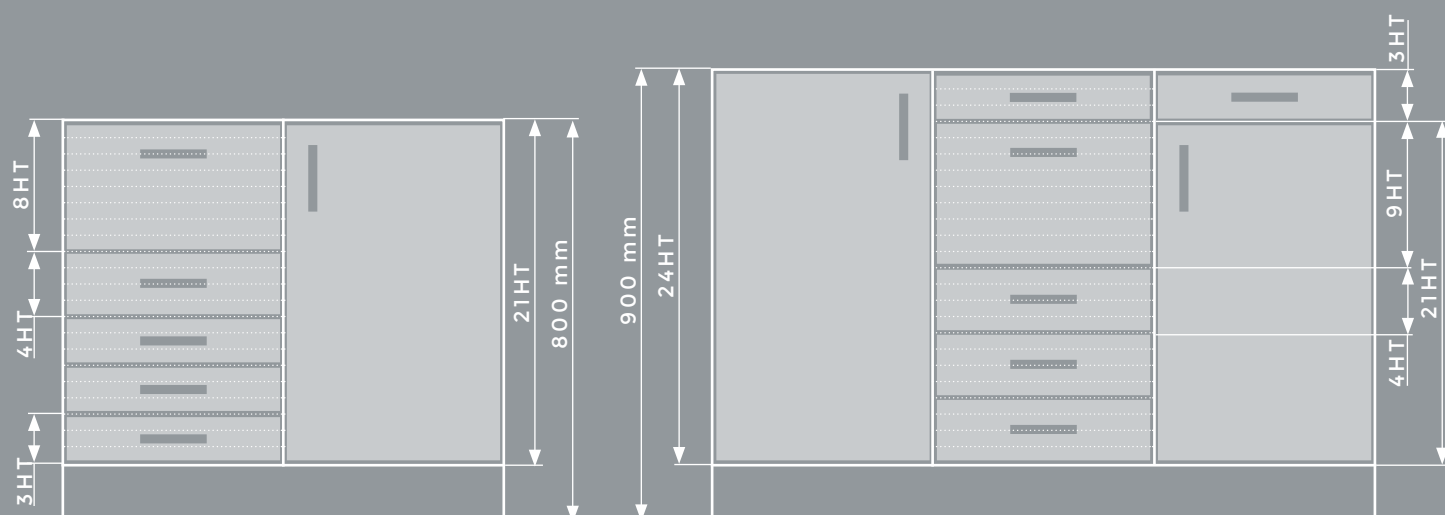


Abb. Anschlag rechts

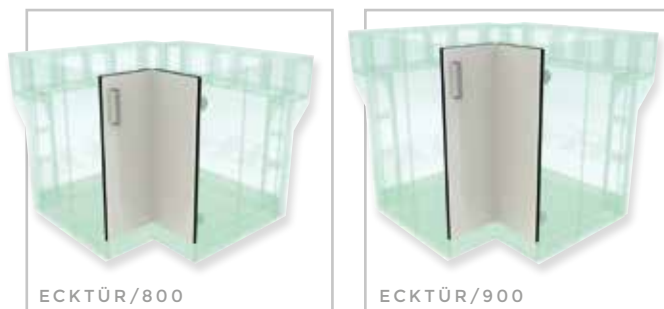

EKTÜR FÜR ECKSCHRANK

Höhe Grundmodul	800 mm	900 mm
Anschlag rechts		
Best.Nr.	A5810255	A5810257
Anschlag links		
Best.Nr.	A5810256	A5810258

DREHBODEN FÜR ECKSCHRANK

Best.Nr.	A5810072	A5810073
----------	----------	----------



QATM



HT-PRINZIP

Das von QATM entwickelte HT-Modulsystem ermöglicht ein außergewöhnliches Design mit einem sehr ruhigen Erscheinungsbild. Versprünge und unschöne Fluchten können durch die Kombination der verschiedenen Höhenmodule minimiert werden.

Schubladen und Türen sind frei miteinander kombinierbar, bis die 21 HT (800 mm) bzw. 24 HT (900 mm) voll sind. Einbauten in die Arbeitsfläche können mit Blenden in verschiedenen Höhen ausgestattet werden.

Schubhöhen / mm

HT	front	inside
3	92	55
4	124	87
6	188	151
8	252	215
9	284	247

Türhöhen / mm

15	476
18	572
20	636
21	668
24	764



3HT/1-ZEILIG



4HT/1-ZEILIG



8HT/1-ZEILIG



9HT/1-ZEILIG

SCHÜBE

Höhe	3 HT	4 HT	6 HT	8 HT	9 HT
Breite	440 mm (1-zeilig)				
Best.Nr.	A5810029	A5810030	A5810349	A5810031	A5810317
Breite	880 mm (2-zeilig)				
Best.Nr.	A5810051	A5810052	A5810350	A5810053	A5810380



3HT/2-ZEILIG



4HT/2-ZEILIG



8HT/2-ZEILIG

ANTIRUTSCH-SCHUTZMATTE


Zeilen	1
Best.Nr.	Z5810005
Zeilen	2
Best.Nr.	Z5810006

SCHUBFACH PUTZTUCHABROLLER


Höhe	15 HT
Best.Nr.	A5810445

SYSTEM TÜREN UND SCHÜBE



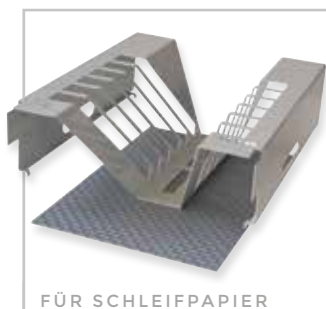

FÜR SCHLEIFPAPIER

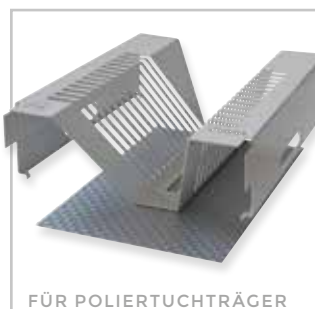

FÜR POLIERTUCHTRÄGER



SYSTEM ABFALLSAMMLER XL



ABFALLSAMMLER

SCHEIBENABLAGE

Einleger für Schub 9 HT (1-zeilig)

für Schleifpapiere

Fächer 6

Best.Nr. A5810352

für Poliertuchträger

Fächer 13


Best.Nr. A5810351




SET 1



SET 2

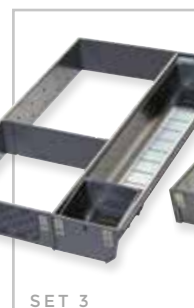

SET 3

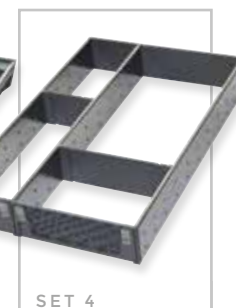

SET 4

EINLAGENSETS

Set	1	2	3	4
Best.Nr.	Z5810001	Z5810002	Z5810003	Z5810004

ABFALLSAMMLER

Höhe 15 HT
Best.Nr. A5810272

SYSTEM ABFALLSAMMLER XL

Höhe Grundmodul	800 mm	900 mm
Tür rechts		
Best.Nr.	A5810414	A5810412
Tür links		
Best.Nr.	A5810415	A5810413

RATA



SOFTEINZUG UND SCHARNIERDÄMPFUNG

Eine Scharniertechnik der neuesten Generation lässt die Türen leichtgängig und gedämpft schließen. Die robuste Metallkonstruktion macht die Schubladen belastbar und stabil, volle Übersicht gewährleistet der Vollauszug. Durch den gedämpften Endeinzug wird ein Zuschlagen der Schubladen verhindert und das Schließen angenehm leise.

EINLAGESETS

Die Einsätze passen rutschfest in die Schubladentiefe und können in der Breite frei positioniert werden. Die Edelstahlwannen sind herausnehmbar.

SCHUTZMATTEN

Weiche und dämpfende Schubladeneinlagen sind in Einheitsgröße erhältlich und können leicht angepasst werden.

ABFALLSAMMLER

Zur Wahl stehen ein Einbaumodul mit je einem herausnehmbaren 8 und 17 Liter Abfallbehälter und der Abfallsammler XL. Hier kann durch eine Öffnung in der Arbeitsfläche der Abfall direkt in einen in den Schrank integrierten Abfallbeutel entsorgt werden.



SCHUTZMATTE



2-FACH



3-FACH

Abb. Verlängerung nach rechts



LÄNGERE PLATTE 2-FACH



LÄNGERE PLATTE 3-FACH

HPL-ARBEITSPLATTE

Zeilen	2	3
Best.Nr.	A5810037	A5810041

für Abschlusschrank

Abschluss	links	rechts
Best.Nr.	A5810115	A5810119

für Abschlussinsel

Best.Nr.	A5810208
----------	----------

für Eckschrank

Best.Nr.	A5810077
----------	----------

Abb. Abschluss links



ABSCHLUSSCHRANK



ABSCHLUSSINSEL



ECKE

SYSTEM OBERFLÄCHEN



PLATTENVERLÄNGERUNG

Zeilen	2	3
Verlängerung links		
Best.Nr.	A5810337	A5810339
Verlängerung rechts		
Best.Nr.	A5810338	A5810340



LÜCKENAUSGLEICH



ABSCHLUSSPROFIL

MEDIENDURCHFÜHRUNGEN

Abdeckung

Best.Nr. A5810269

Große Bürste

Abdeckung 2-teilig

Best.Nr. A5810268

Kleine Bürsten

2x Mediendurchführung

Best.Nr. A5810372

Steckdosen, Bürste

2x 230 V

Best.Nr. A5810373



MEDIENDURCHFÜHRUNG



ABDECKUNG



2 KLEINE BÜRSTEN



GROSSE BÜRSTE



2 STECKDOSEN, BÜRSTE

RATA



ANDERE OBERFLÄCHEN

Für extreme Oberflächenbelastung, z.B. durch Chemikalien, bieten wir Arbeitsflächen aus Labor-HPL, Edelstahl oder Vollkeramik. Diese sind hier nicht aufgeführt und müssen direkt angefragt werden, da es sich um bedarfsgefertigte Elemente handelt.

RAUMANPASSUNG

Durch eine Verlängerung der Tischplatte um bis zu 440 mm können Lücken zwischen Zeilenende und Wand ausgeglichen werden. Die Front wird mit Blende oder Tür vervollständigt.

ABSCHLUSSPROFIL

Für einen sauberen Wandabschluss kann ein Alu-Abschlussprofil aufgesteckt werden, dessen Innenkante mit einer Silikon-Kunststoffleiste abgedichtet ist.

Abb. Mischbatterie



Abb. Armhebelstandarmatur u. Augendusche



Abb. für 800er Grundmodul



SPÜLEN

Unterbaubecken Keramik

Zeilen	1
--------	---

Best.Nr. A5810265

Keramik-Einbauspüle mit Abtropffläche

Zeilen	2
--------	---

Becken	links	rechts
--------	-------	--------

Best.Nr. A5810054 A5810055

Beckenmatte Unterbaubecken Spüle

Best.Nr. Z5810007 Z5810008

ARMATUREN

Mischbatterie	Niederdruck	Hochdruck
---------------	-------------	-----------

Best.Nr. A5800022 A5800023

Armhebelstandarmatur

Best.Nr. A5800475

Augendusche

Best.Nr. A5800045

UNTERTISCH-WASSERBOILER

Kapazität 5 Liter

Stromanschluss 230 V/50 Hz

Best.Nr. A5800030

UNTERTISCH-DURCHLAUFERHITZER

Stromanschluss 230 V/50 Hz

Best.Nr. A5810379

UNTERTISCH-DURCHLAUFERHITZER

Elektronisch geregelt

Stromanschluss 400V/50 Hz

Best.Nr. A5810336



SYSTEM ARBEITSPLATTEN

Abb. Positionsmöglichkeiten für Unterbaubecken


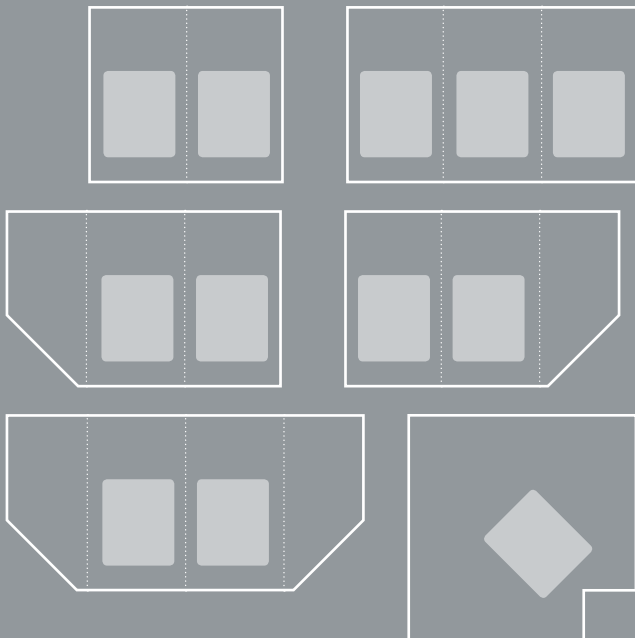


Abb. Positionsmöglichkeiten für Keramikspüle mit Abtropffläche



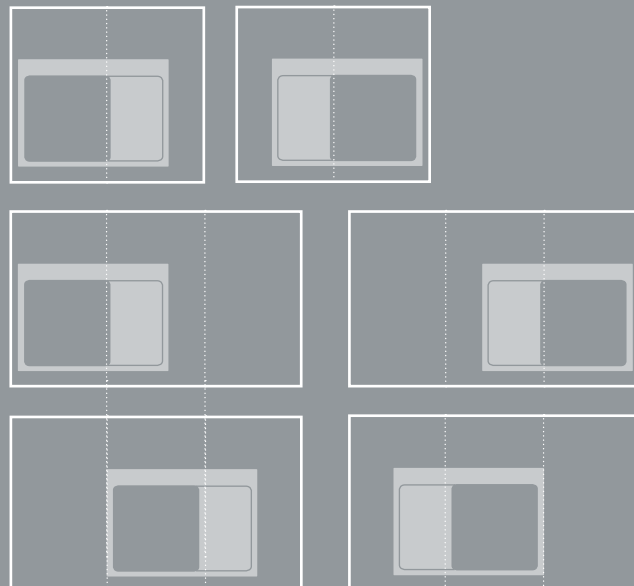

SEDIMENTATIONSBEHÄLTER

SEDIMENTATIONSBEHÄLTER

- » mit Einfahrmechanismus
- » 2-Kammer-PVC-Behälter 45 Ltr.

Höhe Grundmodul 800 mm

Best.Nr. A5810261

Ablaufaufhängung

Best.Nr. A5810262

Höhe Grundmodul 900 mm

Best.Nr. A5810237

Ablaufaufhängung

Best.Nr. A5810263



UMWÄLZKÜHLUNG

UMWÄLZKÜHLUNG

- » mit Einfahrmechanismus
- » 2-Kammer-PVC-Behälter 45 Ltr.
- » Einlaufsieb mit Filtersack

Türhöhe min. 21 HT

Best.Nr. A5800484

Stromanschluss 400 V/50 Hz

Maße BxHxT 366x540(640)x610 mm



EINFAHRMECHANISMUS



SYSTEMKÜHLER

SYSTEMKÜHLER

- » für Tischmodelle
- » integriert in Schubfach

Höhe Schub 18 HT

Best.Nr. A5810171

KÜHLUNG QPRESS 50

- » für modulare Einbettpresse
- Qpress 50

Höhe Schub 21 HT

Stromanschluss 230 V/50 Hz

Best.Nr. A0800235

Stromanschluss 110 V/60 Hz

Best.Nr. A0800236



EINBAUSPÜLEN

Das Keramik-Unterbaubecken passt in jede vollständige Zeile.

Die Keramikeinbauspüle belegt 2 Zeilen. Beide Becken nutzen eine Schrankhöhe von 6 HT. Zum Schutz der Keramik kann eine robuste Gittermatte eingelegt werden.

Bei Einbau eines Unterbaubeckens in eine Vollkeramik-Tischoberfläche können Abtropfrillen in die Keramik integriert werden.

FUNKTIONSELEMENTE

Der Einfahrmechanismus der Umwälzkühlung bzw. des Sedimentationsbehälters gewährleistet die Mobilität auch bei gefülltem Behälter.

NÜTZLICHES ZUBEHÖR

Erschütterungsempfindliche Mess- und Prüfgeräte wie Mikroskope, Härteprüfer etc. stellen besondere Anforderungen an ihr Umfeld.

Die elastisch gelagerte Hartgesteinplatte minimiert von außen einwirkende Vibrationen und kann einfach auf die Labormöbel aufgesetzt werden.



AUFTISCHSOCKEL

Abb. für 800er Grundmodul



REGAL, 2-ZEILIG



REGAL, 3-ZEILIG



ECKREGAL

REGALE

Gesamthöhe	1950 mm	
Höhe Basismodul	800 mm	900 mm
2-zeiliges Regal		
Best.Nr.	A5810015	A5810016
3-zeiliges Regal		
Best.Nr.	A5810017	A5810018
Eckregal		
Best.Nr.	A5810032	A5810033

OBERE BLENDEN

2-zeiliges Regal	
Best.Nr.	A5810327
3-zeiliges Regal	
Best.Nr.	A5810328
Eckregal	
Best.Nr.	A5810329

Abb. für 800er Grundmodul, 2-zeilig



REGALBLENDEN, 2-ZEILIG



REGALBLENDEN, 3-ZEILIG



REGALBLENDEN, ECKE

SYSTEM REGALE UND OBERSCHRÄNKE


Abb. bei 800er Unterbau



Regalblenden

Blende ohne Medienanschluss

Abb. für 800er Grundmodul

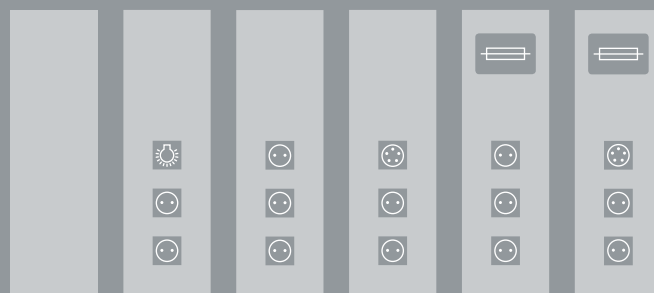



LED-BELEUCHTUNG

LED-BELEUCHTUNG

Zeilen	2	3
Länge	713 mm	1113 mm
für Regale		
Best.Nr.	A5810110	A5810109
für Oberschrank mit Flügeltüren		
Best.Nr.	A5810251	A5810252
für Oberschrank mit Hochschwenklappe		
Best.Nr.	A5810108	A5810109

Ecke für Regale

Länge 2x 513 mm

Best.Nr. A5810253



MEDIENLEISTE

MEDIENFRONT

Höhe Basismodul	800 mm	900 mm
Leerblende		
Best.Nr.	A5810093	A5810099
Lichtschalter, 2x 230 V Steckdosen		
Best.Nr.	A5810092	A5810098
3x 230 V Steckdosen		
Best.Nr.	A5810090	A5810096
400 V und 2x 230 V Steckdosen		
Best.Nr.	A5810091	A5810097
3x 230 V Steckdosen gesichert		
Best.Nr.	A5810094	A5810088
400 V und 2x 230 V Steckdosen gesichert		
Best.Nr.	A5810089	A5810095



MEDIENSÄULEN

Unterhalb der Lagerfläche kann die Säulenfront beidseitig und leicht zugänglich für Medienanschlüsse, wie z.B. Stromanschluss und Beleuchtungsschalter, genutzt werden. Nicht genutzte Mediensäulen werden wie in den Regalebenen mit HPL verblendet. Auf Anfrage kann auch ein Druckluft- oder Wasseranschluss integriert werden.

BELEUCHTUNG

Mit energieeffizienten LED-Leuchten unter dem Oberbau kann der Arbeitsbereich großflächig ausgeleuchtet werden. Der Lichtschalter wird in den Mediensäulen integriert.

ANPASSUNG

Bei Aufstellung höherer Geräte auf der Arbeitsfläche kann der untere Regalboden auch weggelassen werden.



Lichtschalter



230 V



400 V



Sicherung

Abb. für 800er Grundmodul, mit Türen



OBERSCHRANK, 2-ZEILIG



TÜREN, 2-ZEILIG



OBERSCHRANK, 3-ZEILIG



TÜREN, 3-ZEILIG

OBERSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN

Gesamthöhe	1950 mm	
Höhe Grundmodul	800 mm	900 mm

2-zeiliger Oberschrank für Türen

Best.Nr.	A5810100	A5810101
----------	----------	----------

3-zeiliger Oberschrank für Türen

Best.Nr.	A5810102	A5810103
----------	----------	----------

Türen-Set für

Zeilen	2	3
--------	---	---

Best.Nr.	A5810249	A5810250
----------	----------	----------

ECKSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN UND DREHBODEN

Gesamthöhe	1950 mm	
Höhe Grundmodul	800 mm	900 mm

Ecke mit Drehboden

Best.Nr.	A5810381	A5810382
----------	----------	----------

Oberschrank 1-zeilig

Best.Nr.	A8510383	A5810384
----------	----------	----------

Flügeltür links

Best.Nr.	A5810386
----------	----------

Flügeltür rechts

Best.Nr.	A5810385
----------	----------

Flügeltür Eckschrank

Best.Nr.	A5810387
----------	----------

Abb. für 900er Grundmodul



ECKE MIT DREHBODEN

SYSTEM REGALE UND OBERSCHRÄNKE



Abb. für 800er Grundmodul, mit Hochschwenklappe



OBERSCHRANK, 2-ZEILIG



KLAPPE, 2-ZEILIG



OBERSCHRANK, 3-ZEILIG



KLAPPE, 3-ZEILIG

OBERSCHRANK MIT HOCHSCHWENKKLAPPE

Gesamthöhe 1950 mm

Höhe Grundmodul 800 mm 900 mm

2-zeiliger Oberschrank für Hochschwenklappe

Best.Nr. A5810104 A5810105

3-zeiliger Oberschrank für Hochschwenklappe

Best.Nr. A5810106 A5810107

Klappen für Zeilen 2 3

Best.Nr. A5810246 A5810247



HOCHSCHWENKKLAPPE

RATA



ÖFFNEN UND HOCHSCHWENKEN

Durch die hochwertigen Bewegungskomponenten lassen sich Türen und Klappen sanft schließen. Der leichtgängige Hochschwenkmechanismus stoppt in jeder Öffnungsposition.



Abb. für 800er Grundmodul



SÄUREN-LAUGEN-MODUL

Zeilen	2	3
Höhe Grundmodul	800 mm	
Best.Nr.	A5810060	A5810058
Höhe Grundmodul	900 mm	
Best.Nr.	A5810061	A5810059

SÄUREN-LAUGEN-MODUL

Funktionseinsatz zur Säuren-Laugen-
Aufbewahrung mit Abluftüberwachung

- » Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Aluminium
- » Innenkorpus aus hochbeständigen, melaminharzbeschichteten HPL-Verbundplatten
- » Türen und Auszugsböden aus resistantem HPL-Vollmaterial
- » herausnehmbare Auffangwanne aus PP-Kunststoff auf jedem Auszugsboden
- » beide Flügeltüren (Öffnungswinkel ca. 100°) separat bedien- und abschließbar
- » Türscharniere außen am Schrank zum Schutz vor Dämpfen aggressiver Chemikalien
- » Entlüftung über einen Stutzen an der Schrankrückseite

SYSTEM-INTEGRATION SICHERHEITSSCHRÄNKE



Abb. für 800er Grundmodul



SICHERHEIT, 2-ZEILIG



SICHERHEIT, 3-ZEILIG



KOMBINATION, 3-ZEILIG

SICHERHEITSMODUL

Zeilen	2	3
Höhe Grundmodul	800 mm	
Best.Nr.	A5810240	A5810238
Höhe Grundmodul	900 mm	
Best.Nr.	A5810241	A5810239

KOMBINATIONSEINSATZ

Kombination aus Säuren-Laugen- und Sicherheitsmodul		
Höhe Grundmodul	800 mm	900 mm
Best.Nr.	A5810273	A5810274

SICHERHEITSMODUL

Funktionseinsatz zur Aufbewahrung brennbarer Flüssigkeiten mit Abluftüberwachung

- » Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Aluminium
- » Innenkorpus entspricht der Feuerwiderstandsklasse F90 gemäß DIN 4102
- » Sicherheit im Brandfall: Selbstschließung der Schubladen und Türen durch integrierte Thermoauslösung
- » Türen bzw. Schubladen separat bedien- und abschließbar
- » Türen in jeder Position arretierbar (Öffnungswinkel ca. 135°)
- » Schrankinnenraum komplett einsehbar
- » Einlegewannen aus PE oder PP, erhöhter Schutz vor Korrosion; zum leichten Reinigen herausnehmbar
- » Entlüftung über einen Stutzen an der Schrankrückseite

RATA



LAGERUNG VON CHEMIKALIEN

Die Systemlaborschränke mit Abluftüberwachung für Säuren-Laugen- und Gefahrstoff-Aufbewahrung sind für den Laboreinsatz konzipiert und entsprechen den Richtlinien für eine sichere und vorschriftsgemäße Lagerung.

Der Sicherheitsschrank ist speziell für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten geeignet.

Laborabzug und Apothekenabzug auf Anfrage.



APOTHEKENABZUG



REGAL/900



REGAL/1200



REGAL/1950

REGALE

Höhe	900 mm	1200 mm	1950 mm
verstellbare Fachböden	2	3	4

Fachböden

Best.Nr.	M7501031	M7501032	M7501033
----------	----------	----------	----------

SCHRÄNKE

Höhe	900 mm	1200 mm	1950 mm
verstellbare Fachböden	2	3	4

Fachböden

Best.Nr.	M7501034	M7501035	M7501036
----------	----------	----------	----------

ZUBEHÖR FÜR REGALE/SCHRÄNKE

Fachboden 1

Best.Nr. 07501226

SCHRÄNKE, ABSCHLIESSBAR

Best.Nr. M7501037 M7501038 M7501039



FACHBODEN



SCHRANK/900



SCHRANK/1200



SCHRANK/1950

SYSTEM REGALE UND SCHRÄNKE





SCHREIBTISCH/1320



SCHREIBTISCH/1760



LABORTISCH/1320



LABORTISCH/1760

SCHREIBTISCHE, ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBAR

Breite	1320 mm	1760 mm
Höhe	635-1310 mm	635-1310 mm
Best.Nr.	M7502000	M7502001

LABORTISCHE, ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBAR

Breite	1320 mm	1760 mm
Höhe	630-1030 mm	630-1030 mm
Best.Nr.	M7500012	M7500013

SCHREIBTISCHE, MANUELL HÖHENVERSTELLBAR

Breite	1320 mm	1760 mm
Höhe	655-795 mm	655-795 mm
Best.Nr.	M7502002	M7502003



ROLLCONTAINER

ROLLCONTAINER

BxHxT	435x632x580 mm
Best.Nr.	M7501030

ZUBEHÖR ROLLCONTAINER

Trennwände Set	3 Trennwände
Best.Nr.	Z7501000
Fächereinlage	6 Fächer
Best.Nr.	Z7501001

ZUBEHÖR SCHREIBTISCHE

Flexibler Kabelkanal	1
Best.Nr.	Z7502000
PC Halterung	1
Best.Nr.	Z7502001

RATA



REGALE

Die offenen Regale sind mit verstellbaren Fachböden ausgestattet.

SCHRÄNKE

Die zweitürigen Schränke sind mit verstellbaren Fachböden ausgestattet. Die Schränke sind auch abschließbar erhältlich.

SCHREIBTISCHE

Die höhenverstellbaren Schreibtische haben eine 15 mm HPL-Tischplatte und sind bis 120 kg belastbar.

Tischhöhe manuell: 655 - 795 mm.

Tischhöhe elektrisch: 635 - 1310 mm.

Mit integriertem Kabelkanal und 2 Kabeldurchlässen.

LABORTISCHE

Die höhenverstellbaren Labortische haben eine Tischplatte aus HPL und sind bis 400 kg belastbar. Die Tische bestehen aus einer extrem stabilen Alu-Metallkonstruktion (pulverbeschichtet). Tischhöhe elektrisch: 630 - 1030 mm. Mit integriertem Kabelkanal und Kabeldurchlass.

ROLLCONTAINER

Die Rollcontainer haben eine Korpus aus HPL, 1 Utensilienfach, 3 Schubladen mit Vollauszug und einem gedämpften Endeinzug. Die Container sind abschließbar, die Rollen sind feststellbar.



LABORTISCH 770/880



LABORTISCH 770/1320



LABORTISCH 770/1760



LABORAUFsatz

LABORTISCHE, HÖHE 770 MM

Breite	880 mm	1320 mm	1760 mm
Best.Nr.	M7500000	M7500001	M7500002

LABORTISCHE, HÖHE 900 MM

Breite	880 mm	1320 mm	1760 mm
Best.Nr.	M7500003	M7500004	M7500005

ZUBEHÖR FÜR LABORTISCHE

Schwingungsgedämpfter
Laboraufsatz

Best.Nr. A5810431



LABORTISCH 900/880



LABORTISCH 900/1320



LABORTISCH 900/1760

SYSTEM LABORTISCHE




LABORTISCH 770/880
MIT HARTGESTEINPLATTE

LABORTISCH 770/1320
MIT HARTGESTEINPLATTE

LABORTISCH 770/1760
MIT HARTGESTEINPLATTE


LABORTISCHE MIT HARTGESTEINPLATTE, HÖHE 770 MM

Breite	880 mm	1320 mm	1760 mm
Best.Nr.	M7500006	M7500007	M7500008

LABORTISCHE MIT HARTGESTEINPLATTE, HÖHE 900 MM

Breite	880 mm	1320 mm	1760 mm
Best.Nr.	M7500009	M7500010	M7500011


LABORTISCH 900/880
MIT HARTGESTEINPLATTE

LABORTISCH 900/1320
MIT HARTGESTEINPLATTE

LABORTISCH 900/1760
MIT HARTGESTEINPLATTE

RATA



LABORTISCHE

Die Labortische haben eine Abdeckplatte aus HPL und sind bis 400 kg belastbar. Die Tische bestehen aus einer extrem stabilen Alu-Metallkonstruktion (pulverbeschichtet). Sie sind in zwei verschiedenen Höhen erhältlich: 770 mm oder 900 mm. Mit integriertem Kabelkanal und 1 oder 2 Kabeldurchlässen.


LABORTISCHE MIT HARTGESTEINPLATTE

Labortischausstattung wie oben beschrieben. Zusätzlich mit integrierter passiv schwingungsgedämpfter Hartgesteinplatte (B:500 x T:570 mm). Ideal für schwingungsempfindliche Mess- und Prüfgeräte wie Härteprüfer und Mikroskope. Empfohlene Belastung der Hartgesteinplatte: max. 80 kg

Abonnieren Sie unseren Newsletter!

Sie erhalten 3-4 Mal im Jahr
exklusive Informationen zu
Veranstaltungen, Applikationen
und Produktneuheiten.

Jetzt anmelden:

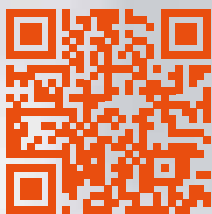

www.qatm.de/newsletter
(Eine Abmeldung ist jederzeit möglich)

