



ELEKTROLYTISCH POLIJSTEN & ETSMACHINE

QETCH 100 M

qatm.com/nl/producten/slijpen-polijsten-etsen/electrolytisch-polijsten-etsen/qetch-100-m/

QETCH 100 M

ELEKTROLYTISCH POLIJSTEN & ETSMACHINE

De Qetch 100 M is een elektrolytische polijstmachine en etser met een mobiele batterij. Het overtuigt door zijn compacte en robuuste constructie, ideaal voor gebruik buiten het laboratorium.

De eenvoudige bediening gelijktijdig met hoge functionaliteit is weergaloos. De behuizing van epoxy-gecoate aluminium voldoet aan de hoogste eisen van functionaliteit, stabiliteit en design. Alle gevoelige onderdelen zijn goed beschermd voor transport en lokale bediening. Voor maximaal comfort is het uitgerust met handvat en draagriem.



QETCH 100 M


PRODUCTVOORDELEN

- | Draagbaar apparaat voor elektrolytisch polijsten en etsen
- | Volautomatische programmaverloop bestuurd door een microprocessor
- | Onafhankelijk van stroomtoevoer met behulp van Li-Ion-opslagbatterij
- | Handvat met geïntegreerde polijstunit, start/stop functie
- | Handvat met veelkleurige LED voor het weergeven van de huidige toestand
- | Bedieningspaneel met duidelijk LCD-display voor alle belangrijke operationele status
- | Aanpasbare spanning en stroom, instelbare bedrijfstijd

QETCH 100 M

TECHNISCHE GEGEVENS

Max. Vermogen	160 W
Max. spanning	90 V DC
Max. stroomsterkte	2 A
Polijsten gebied	~ Ø 9 mm
B x H x D	380 x 355 x 180 mm
Tank van elektrolyt	1 l
Gewicht	~ 8,5 kg (zonder elektrolyt)

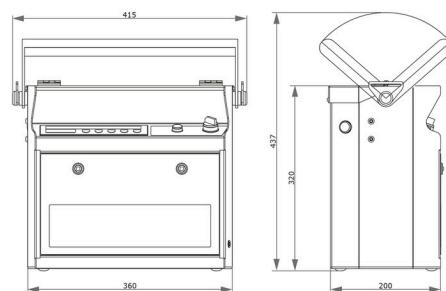

Maattekening

QETCH 100 M

PERFECT ETS - INSTRUMENTEN VAN QATM

Etching is more reliable, safer and more efficient when performed with the right equipment: Knowledge, exercising care and the right choice of consumables and equipment are crucial.

DISCOVER OUR ETCHING MACHINES →

qatm.com/nl/producten/slijpen-polijsten-etsen/electrolytisch-polijsten-etsen/



QETCH 100 M

BESTELINFORMATIE

BASIS UITRUSTING

MACHINE (ALLE POSITIES NOODZAKELIJK)

M6201000	Qetch 100 M (Kristall 650) Base machine
----------	---

STROOMVOORZIENING (1 ITEM NOODZAKELIJK)

A6201000	Qetch 100 M power supply 220-230V/50/60Hz
----------	---

A6201001	Qetch 100 M power supply 110V/60Hz (1Ph/N/PE)
----------	---

ELECTRICAL BOARD FOR PORTABLE GRINDER (TO BE ORDERED WITH THE MACHINE)

A6201004	Unit for using without portable grinder
----------	---

A6201005	Unit prepared for using portable grinder
----------	--

Z6201001	Accessory-Set Qetch 100 M
----------	---------------------------

95003955	Plastic Bottle 1000ml
----------	-----------------------

Z6201000	Handle holder
----------	---------------

QETCH 100 M

ONTVANG UW OFFERTE – AFGESTEMD OP UW EXACTE VEREISTEN

Selecteer de producten die u nodig heeft en bouw uw aanvraaglijst in enkele seconden. Onze experts zullen uw selectie bekijken en een nauwkeurige, vrijblijvende offerte maken.

UW VOORDELEN

- | Bespaar tijd door meerdere items in één keer aan te vragen
- | Vermijd fouten met deskundige beoordeling en aanbevelingen
- | Ontvang een duidelijke, toepassingsgerichte offerte – geen verplichting vereist

Uw aanvraaglijst is altijd zichtbaar in de rechterbovenhoek, zodat u op elk gewenst moment kunt doorgaan.

QETCH 100 M

CONTACTEER ONS

[qatm.com/nl/contact-services/contact-form/?
prefilltext=contact_form.request&product=A01D
01A](https://qatm.com/nl/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=A01D01A)

OFFERTE-AANVRAAG

[qatm.com/nl/producten/slijpen-polijsten-
etsen/electrolytisch-polijsten-etsen/qetch-100-
m/order-data-quote-request/](https://qatm.com/nl/producten/slijpen-polijsten-etsen/electrolytisch-polijsten-etsen/qetch-100-m/order-data-quote-request/)



QATM
a **VERDER** company

qatm.com/nl/producten/slijpen-polijsten-etsen/electrolytisch-polijsten-etsen/qetch-100-m/